


M400LS DRAWER CHANGE

1. Remove storage drawers and patient drawers from left side of cart.
 - a. Remove storage drawer by pulling the drawer out then locate the release lever on each side of the drawer slide. Push down on one side and pull up on the opposite side of the release lever. Pull with a slight tug and remove the drawer from the slide.




- b. Remove shelf if there is one.
2. Install slide pairs onto side of cart body as shown in photo. Fasten with 8-32 x 1/4 round head screw.

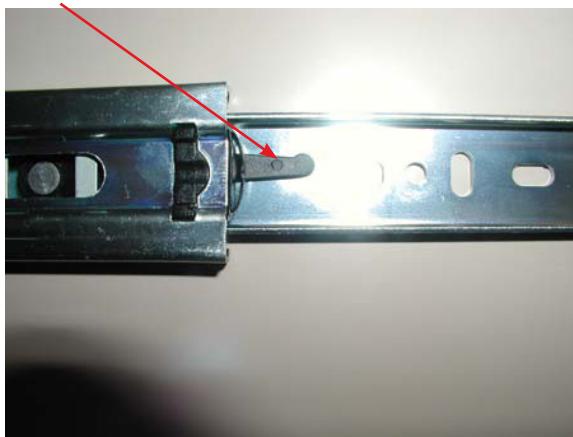


M400LS DRAWER CHANGE— LIONVILLE SYSTEMS MEDICATION CART

- a. Fasten top slide pair in the 1st slide position.
- b. Fasten 2nd drawer slide in the 3rd slide position. Use upper set of holes.

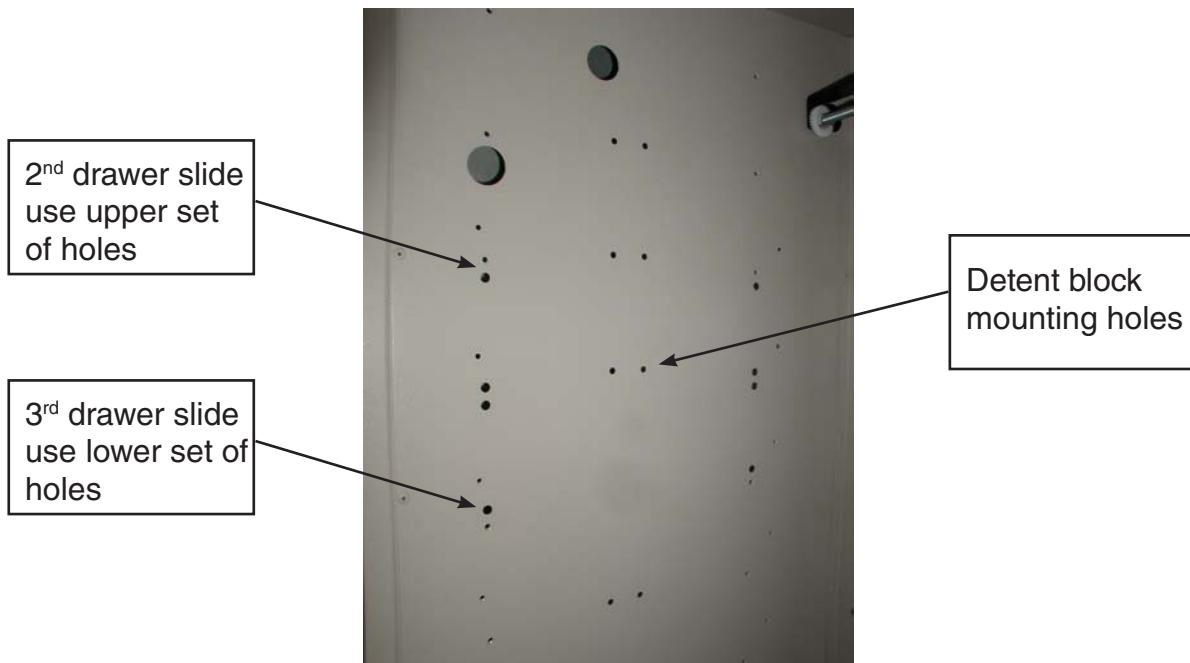

- c. Fasten 3rd drawer slide pair in the 6th slide position. Use lower set of holes.
 - d. Fasten 4th drawer slide pair in the 9th slide position.
3. Install new thick spacer plate above third drawer and secure with 6-32 x 1/4 round head screws.

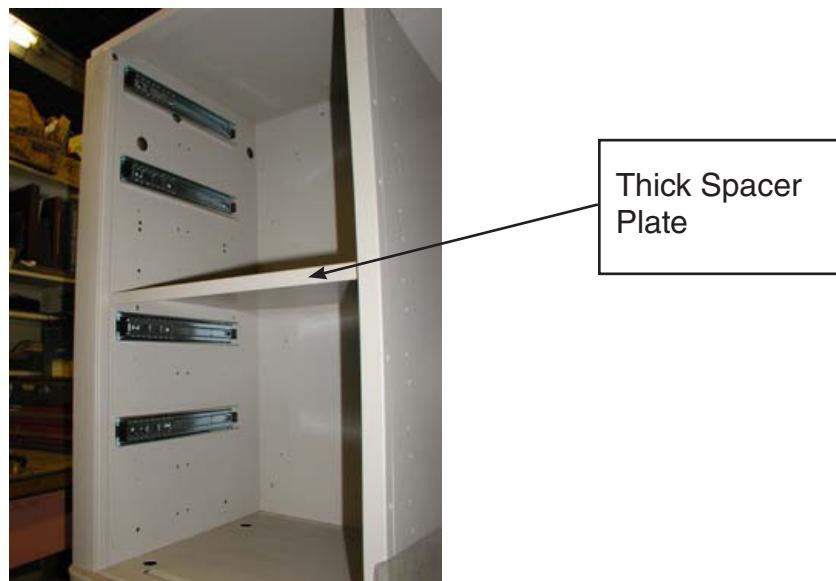

M400LS DRAWER CHANGE — LIONVILLE SYSTEMS MEDICATION CART

4. Install detent block left side wall for all storage drawers.



a. If there are no preexisting holes.


- I. Using template provided. Mark and drill two holes for the detent block with a #29 drill bit.
- II. Fasten detent block with #8 sheet screws.

b. If there are preexisting holes.

- I. Install #6 threaded inserts below each slide pair with appropriate installation tool.
- II. Fasten detent block to wall with 6-32 x 5/8 " pan head screw.

5. Install striker block onto right side wall below slide for each CS drawer installed.

a. Fasten with 6-32 x 3/8 round head screw.

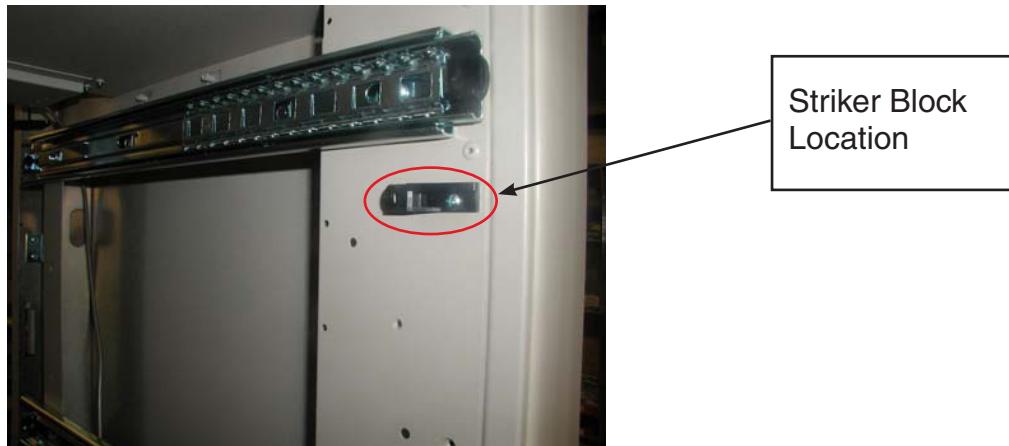

6. Place storage drawers back into cart.

- a. Install 2 tier CS storage drawer in the top slide position. The catch on the back will need to be in the lower set of mounting holes.
- b. Install 3 tier CS storage drawer in the 3rd slide position. The catch on the back for this drawer needs to be in the lower set of mounting holes.
- c. Install 2 tier storage drawer in the 6th slide position. The catch will need to be in the upper set of holes.

- d. Install 3 tier storage drawer in the 9th slide position . The catch for this drawer will need to be in the upper set of mounting holes.
- 7. Check manual lock operation of cart. CS drawers will unlock after the cart is unlocked.
- 8. The configuration should look like the photo below.



We put space to work.[®]

© 2023 InterMetro Industries Corporation, Wilkes-Barre, PA 18705
INSTR-LSDRWR REV 04/23

an Ali Group Company




The Spirit of Excellence

CHARIOT À MÉDICAMENTS LIONVILLE SYSTEMS

CHANGEMENT DE TIROIR M400LS

1. Retirez les tiroirs de rangement et les tiroirs patient du côté gauche du chariot.

un. Retirez le tiroir de rangement en tirant le tiroir, puis localisez le levier de déverrouillage de chaque côté de la glissière du tiroir. Appuyez sur un côté et tirez sur le côté opposé du levier de déverrouillage. Tirez légèrement et retirez le tiroir de la glissière.

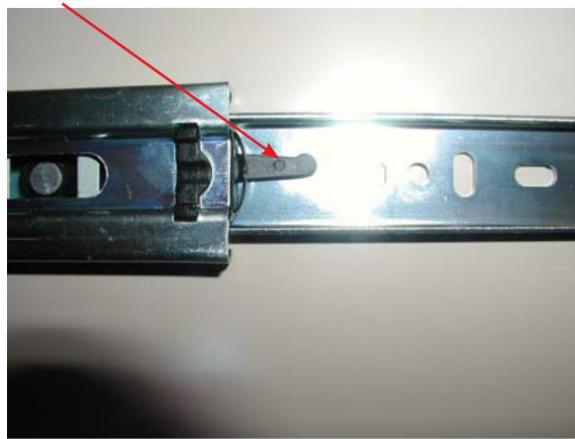

b. Retirez l'étagère s'il y en a une.


2. Installez les paires de glissières sur le côté du corps du chariot, comme indiqué sur la photo. Fixer avec une tête ronde 8-32 x 1/4 vis.



CHANGEMENT DE TIROIR M400LS — CHARIOT À MÉDICAMENTS LIONVILLE SYSTEMS

un. Fixez la paire de glissières supérieures dans la 1^{ère} position de glissière.


b. Fixez la glissière du 2^e tiroir à la 3^e position de la glissière. Utilisez le jeu de trous supérieur.

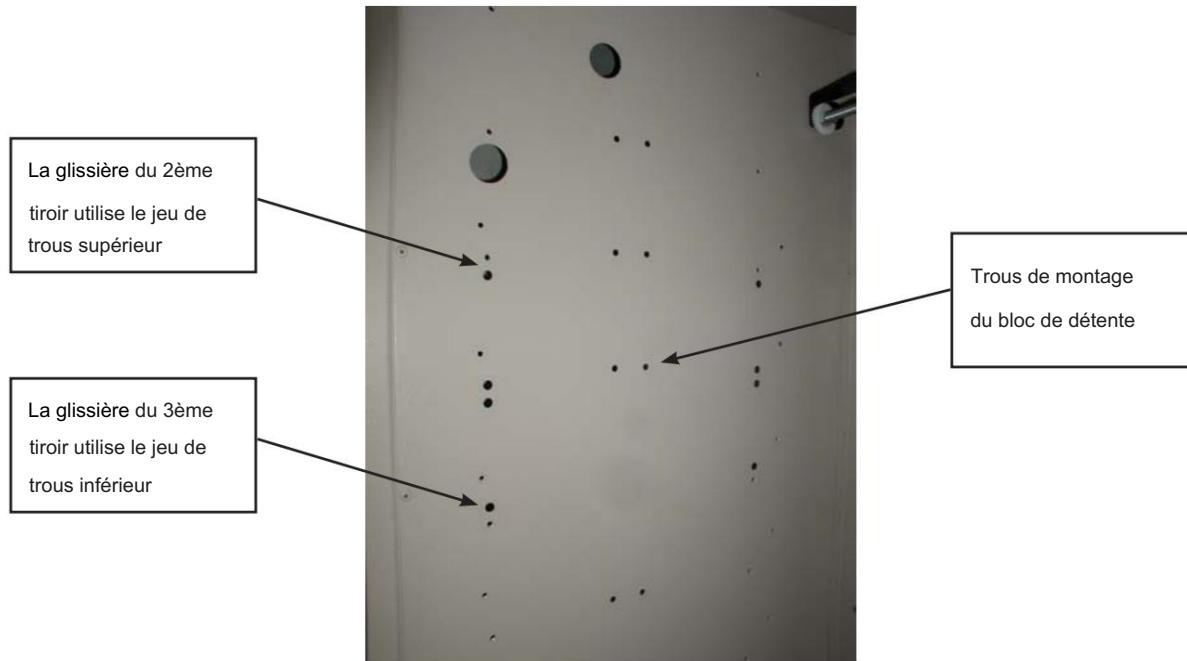

c. Fixez la 3^e paire de glissières de tiroir à la 6^e position de glissière. Utilisez le jeu de trous inférieur.

d. Fixez la paire de glissières de la 4^e tiroir à la 9^e position de glissière.

3. Installez une nouvelle plaque d'espacement épaisse au-dessus du troisième tiroir et fixez-la avec des vis à tête ronde 6-32 x 1/4.

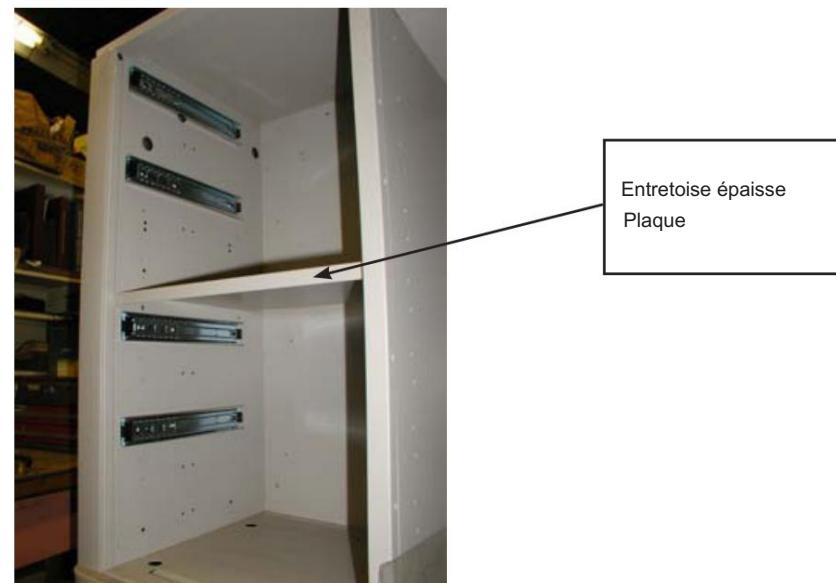

CHANGEMENT DE TIROIR M400LS — CHARIOT À MÉDICAMENTS LIONVILLE SYSTEMS

4. Installez le bloc de verrouillage sur la paroi latérale gauche pour tous les tiroirs de rangement.



un. S'il n'y a pas de trous préexistants.

I. Utilisation du modèle fourni. Marquez et percez deux trous pour le bloc de détente avec un foret n° 29.

II. Fixez le bloc de détente avec des vis à tête n° 8.


b. S'il y a des trous préexistants.

I. Installez les inserts filetés n° 6 sous chaque paire de glissières avec l'outil d'installation approprié.

II. Fixez le bloc de détente au mur avec une vis à tête cylindrique 6-32 x 5/8".

5. Installez le bloc de gâche sur la paroi latérale droite sous la glissière pour chaque tiroir CS installé.

un. Fixez avec une vis à tête ronde 6-32 x 3/8.

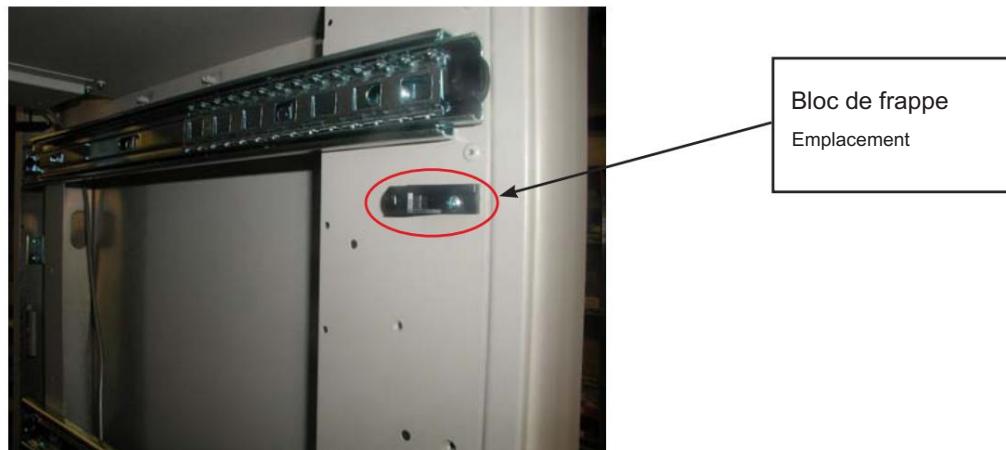

6. Remettez les tiroirs de rangement dans le chariot.

un. Installez le tiroir de rangement CS à 2 niveaux dans la position coulissante supérieure. Le fermoir au dos devra être dans la série inférieure de trous de montage.

b. Installez le tiroir de rangement CS à 3 niveaux dans la 3ème position coulissante. Le loquet à l'arrière de ce tiroir doit se trouver dans l'ensemble inférieur de trous de montage.

c. Installez un tiroir de rangement à 2 niveaux dans la 6ème position coulissante. La prise devra être dans l'ensemble supérieur de trous.

d. Installez un tiroir de rangement à 3 niveaux dans la 9ème position coulissante. Le loquet de ce tiroir devra être dans la série supérieure de trous de montage.

7. Vérifiez le fonctionnement du verrouillage manuel du chariot. Les tiroirs CS se déverrouilleront une fois le chariot déverrouillé.

8. La configuration devrait ressembler à la photo ci-dessous.

